



GUIDE DE PRISE EN MAIN

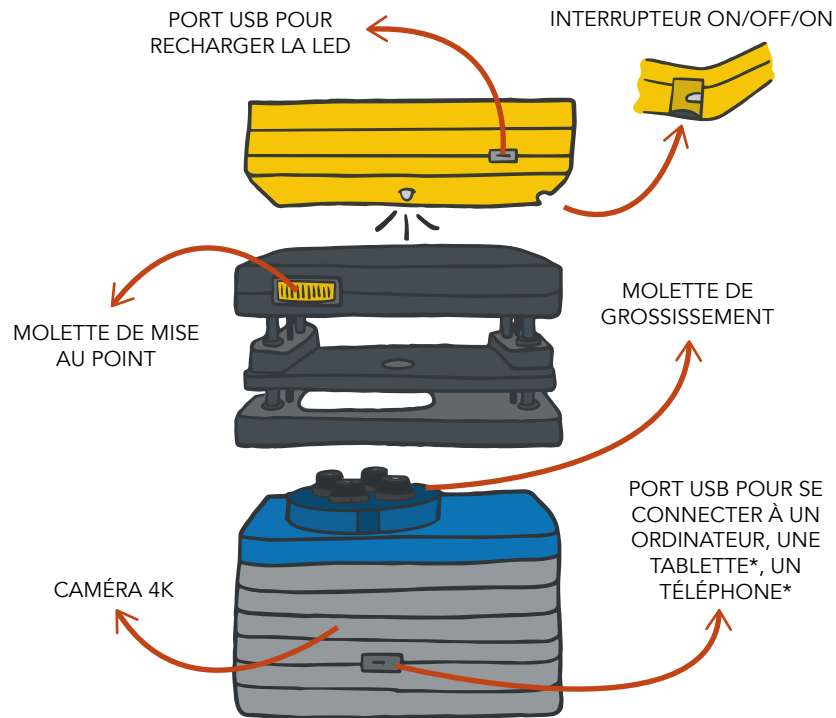

Objectifs & grossissements

CHAMPS D'OBSERVATION
(largeur x hauteur)

x2	4mm x 2,25mm
x5	2mm x 1,12mm
x10	1mm x 0,56mm
x20	0,7mm x 0,39mm

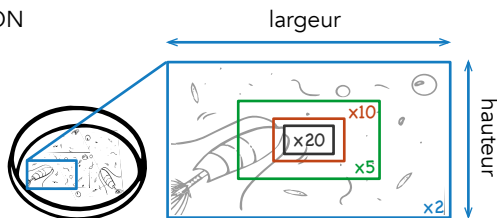

Scanner ce QR Code :



Pour accéder aux
tutoriels vidéos de
prise en main du
Curiosity microscope :

Pour découvrir ce qui
se fait **tout autour du monde** avec le
Curiosity microscope :




1. Collecte du plancton




ÉPUIETTE (À PLANCTON)

Plonger l'**épuiette** dans l'eau et
dessiner des ∞ pour concentrer le
plancton

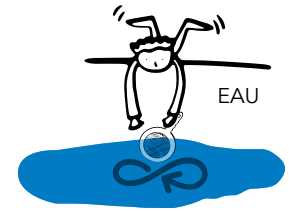


2. Préparation de l'échantillon

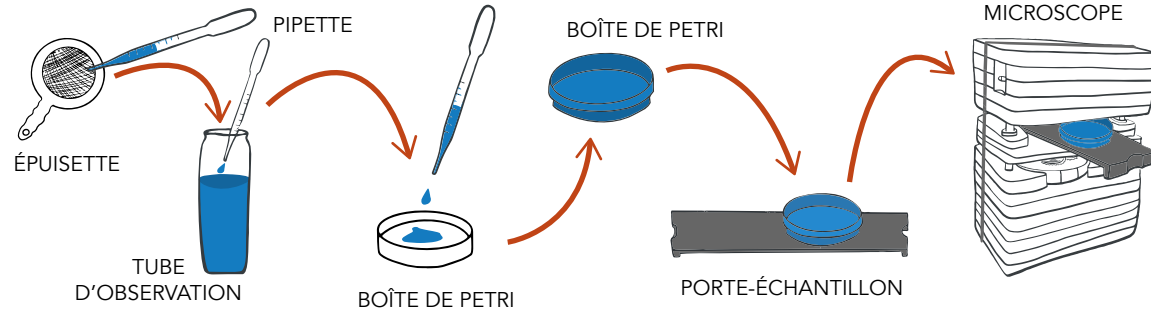


3. Connexion à l'ordinateur, la tablette* ou le téléphone*

CURIOSITY
MICROSCOPE

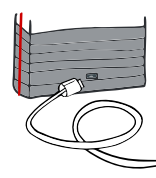

ORDINATEUR

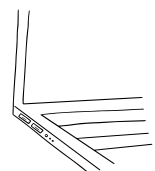

CÂBLE USB



Sur **Mac** : installer puis ouvrir l'app «*Curiosity microscope*» depuis l'AppleStore



Sur **Windows** : ouvrir l'app «*Caméra*», sélectionner la source «*4K USB Caméra*»



Sur **Android** : installer puis ouvrir l'app «*NextCamera*», sélectionner la source «*4K USB Caméra*»



Sur **iOS** : installer puis ouvrir l'app «*Curiosity microscope*» depuis l'AppleStore

*uniquement compatible avec les appareils en USBc


4. Observations

Allumer la **lumière** du microscope et ajuster la netteté
grâce à la **molette de mise au point**.

ORDINATEUR



CÂBLE USB

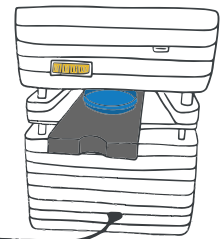

CURIOSITY
MICROSCOPE



Concept et réalisation SeaLabX – Illustrations Marta Musso

* Le premier prototype du microscope Curiosity est issu de l'initiative Plankton Planet.